


## Instruções



Capa .....	1
Identificado Partes .....	2
Antes de Começar / Dividindo o Cabelo .....	3
O Uso do Pente Aspirador em Piolhos .....	4
O Uso do Pente Aspirador em Ninfas Após de 9 Dias .....	5
Substituindo o Filtro de Nylon .....	6
Esterilizando o Pente / Informações Adicionais .....	7

## Identificando Partes

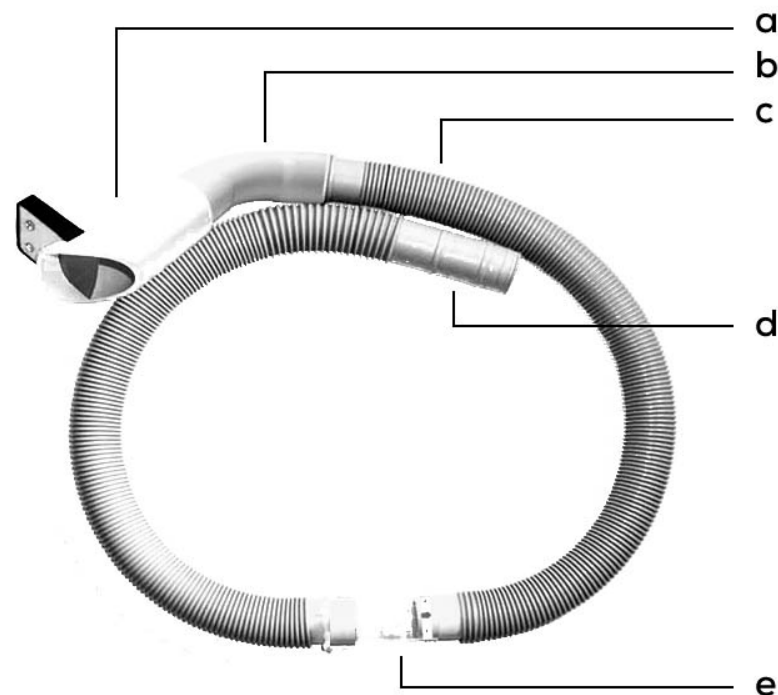

- a. Cabeça do pente
- b. Cabo
- c. Tubo
- d. Base do Tubo (para o bico de sucção do aspirador)
- e. Secção do filtro

### Antes de começar

O cabelo deve ser lavado com xampu e, se possível, hidratado com condicionador. O cabelo deve estar completamente seco, macio e desembaraçado. Nenhum óleo, gel ou spray deve ser aplicado ao cabelo antes de usar do acessório de aspirador.

### Dividindo o cabelo

Se o cabelo é maior que 17 cm, ele deve ser dividido em diferentes seções usando elásticos ou prendedores de cabelos para se certificar que cada seção esteja isolada. Se o cabelo não estiver dividido muito bem, o cabelo ao redor dele será aspirado para dentro do tubo embaraçando o cabelo e dificultando o trabalho do aparelho. Para meninas, o número médio de seções é em torno de 8, dependendo do comprimento e do volume do cabelo. Dividir o cabelo precisamente é importante para facilitar o trabalho.



### O uso do pente aspirador em piolhos

Depois que o cabelo é dividido, o trabalho pode começar. O objetivo é remover todos os piolhos de cada seção. Começando com as seções de trás da cabeça e depois indo para as seções da frente da cabeça. Coloque o bico de sucção do aspirador firmemente na base do tubo e ligue seu aspirador de pó. Remova os elásticos / prendedores de uma seção do cabelo. Deixe o cabelo ser aspirado pela cabeça da escova, pesteie com sequências curtas em um ritmo circular anti-horário, certificando-se sempre que o pente toque o couro cabeludo no movimento descendente. Termine a seção deixando o pente passar por todo o comprimento do cabelo pelo menos duas vezes. Leva apenas alguns minutos para aspirar cada seção, mas você deve certificar-se de cobrir a área inteira exatamente até as linhas divisórias do cabelo. Depois de aspirar a seção, desligue o aspirador. Se há muitos piolhos no filtro, aspire com o pente a mesma seção novamente e então amarre o cabelo da seção recém-aspirada. É necessário aspirar pelo menos duas vezes o cabelo inteiro e trocar o filtro sempre que necessário. A título de informação, profissionais que usam esse equipamento conseguem extrair por volta de 90% dos piolhos na primeira rodada e o restante na segunda rodada.

## O uso do pente aspirador em Ninfas após 9 dias

A pausa de 9 dias é exatamente o tempo necessário para certificar que:

1. Todos os ovos restantes vão eclodir
2. As ninfas piolhos não vão crescer o suficiente para produzir novos ovos

Certifique-se que o cabelo está completamente seco e desembaraçado. Divida o cabelo como você fez antes e o use no cabelo inteiro, seção por seção em todo o cabelo. Se há 10 ou mais ninfas na primeira rodada, repita o processo novamente. Se que você tem certeza que todos as ninfas foram retiradas, então, o trabalho está terminado.

Se você quer reduzir o número de ninfas piolhos depois da pausa de 9 dias, use uma pente fino para lêndeas (por exemplo, LiceMeister, NittyGritty, Terminator Nit Comb, etc) para pentear o cabelo molhado imediatamente após o uso do aspirador de piolhos no primeiro dia.


## Substituindo o Filtro de Nylon



1. Gire e remova o cano branco (a).
2. Gire e remova o cano branco (b), fazendo com que o filtro de nylon com piolhos caia o tigela de plástico branco (não fornecido).
3. Coloque uma filtro de nylon limpo sobre o cano branco (b).
4. Cuidadosamente empurre a capa do filtro sobre o filtro de nylon limpo e, firmemente, coloque-o de volta sobre o cano branco (b).
5. Recoloque a capa do filtro no topo do cano branco (a).

## Esterilizando o Pente

Remova a cabeça do pente do cabo e exponha o pente ao ar quente usando um secador de cabelos (em alta temperatura) através do tubo branco por volta de 15 segundos. Espere esfriar antes de usar novamente. Use uma escova de dentes para remover a sujeira nos dentes do pente. Profissionais devem usar também algodão + álcool isopropílico 70% (IPA) para limpar manualmente os dentes do pente antes de usar o aspirador em cada cliente. **Não limpe o equipamento com água.**

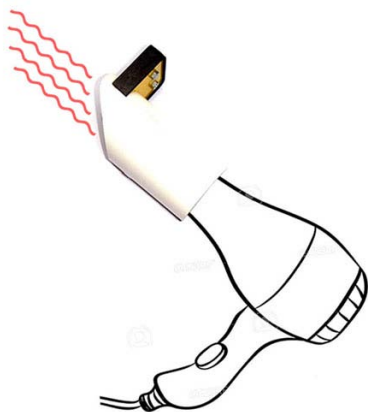

## Informações Adicionais

Para criar um bom poder de sucção, a bolsa ou a área coletora do seu aspirador de pó deve estar vazio / limpa antes de começar o uso do acessório do aspirador.

Caspas, etc. podem obstruir o filtro de nylon e reduzir o poder de sucção do aspirador. Se isso acontecer substitua o filtro de nylon

antes de continuar. O filtro de nylon pode também ser lavado com sabão em água e usado muitas vezes.

O pente é forte o suficiente para suportar a pior das condições. Entretanto, se você notar qualquer nó no cabelo, nós recomendamos desligar seu aspirador e usar um pente convencional para desembaraçar antes de continuar o processo.